

enziSurf[®] ROUTINE

multi entsymaattinen
pinnoille
vaikutus

• YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN • LÄÄKINNÄLLINEN LAITE •



enziSurf[®] ROUTINE

Monietsymaattinen pesuaine terveydenhuoltotilojen lattioiden ja seinäpintojen puhdistukseen (esim. sairaalat, terveysasemat, hoitokodit, lääkinnälliset tilat, hammaslääkäriasemat ja eläinlääkäriklinitkat).

• KAIKILLE PINNOILLE

E

Y

• NOPEA

• «SYVÄPUHDISTUS» E

N

S

• EHKÄISEE O L

• «LUONNOLLINEN» S

S

EI SISÄLLÄ

Instructions for use


Cleaning is an essential step in infection control.

1. Dilute the product in **hot water** as follows:

- 2x30ml in 5L of warm water or
- 120ml in 10L of hot water

Recommended operating temperature between 35-50°C


2. Apply the product to the surface to be decontaminated.
3. Scrub if necessary
4. Let dry.

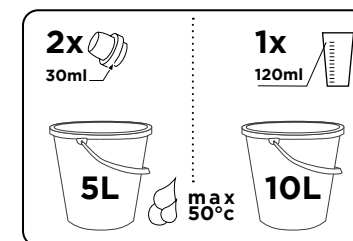

NOTE: make sure to regularly clean the surfaces in contact with patients. In addition to cleaning, it is recommended to disinfect in order to finalize the decontamination process. Nonetheless, the Superior Health Council recommends using disinfection sparingly in order to fight anti microbial resistance (AMR).

Applications

- Tables
- Working table
- Door handles
- Offices
- Counters
- Floors
- Corridors

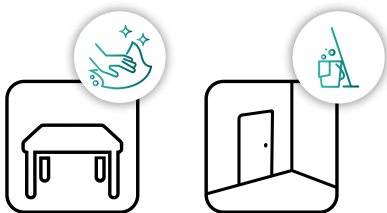

Product Characteristics

- Concentrated formulation combining raw materials of plant origin with enzymes for greater efficiency
- Non-aggressive for the user and the material in contact (compatible with all materials)
- Odourless
- Dye free
- Highly active enzyme complex
- Rate of biodegradability >97% in 28 days (OECD 302B)



Chemical Properties

Appearance: yellowish liquid

Precautions

Store in the original container, closed, between +4°C and +25°C

End of life: 24 months after production

Main Components

99% of the total ingredients are of natural origin.

Enzymatic complex:



protease
amylase
lipase

Delivery Units:



Ref **OL52632**
6 x 1L



Ref **OL52633**
1 x 5 L



Enzymes for patients' safety

Contact:

OneLife s.a.
Avenue Albert Einstein, 15
1348 Louvain-la-Neuve (Belgium)
+32 10 48 34 27 info@onelif-bf.com

onelif-bf.com